

Mphi

Toujours avec vous.

MLS[®]
Multiwave
LockedSystem




Thérapie Laser MLS[®] : disponible partout.

Portable, ergonomique, facile à utiliser, intuitif : une nouvelle opportunité pour mettre à disposition les effets bénéfiques de la Thérapie Laser MLS[®] dans n'importe quel endroit, dans votre cabinet et même à domicile. Complètement autonome, **léger et compact**, Mphi est équipé d'un écran couleur rétroéclairé tactile qui interagit intuitivement avec l'utilisateur.

Thérapie Laser MLS[®]

La Thérapie Laser MLS[®] (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la thérapie laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée.

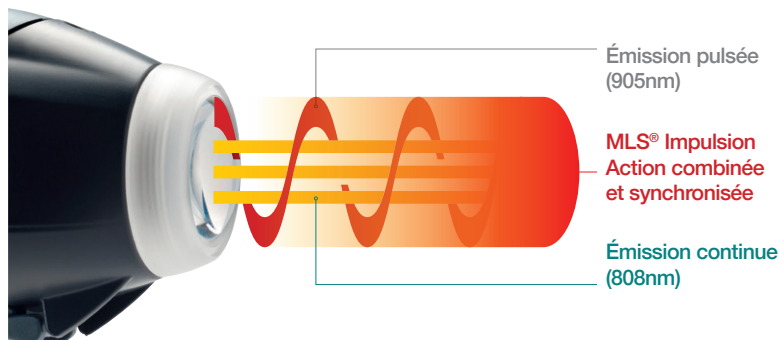

Pointeur

1 source MLS[®] - 25 W de puissance de crête $\varnothing$ 2 cm, Zone-objectif de 3 cm².



ASA
A S A L A S E R
Research and Therapeutic Solutions

Mphi

Caractéristiques techniques



- Gestion simultanée de deux canaux indépendants
- Pointeur avec groupe optique composé d'une source MLS® avec puissance jusqu'à 1,05 W - Puissance de pic 25 W
Zone-objectif ø 2 cm visible par LED à haute efficacité à lumière rouge
- LCD tactile à couleur à haute résolution avec interface utilisateur
- Protocoles certifiés EU MDR
- Possibilité de personnaliser chaque paramètre de traitement
- Espace dédié à l'enregistrement de programmes personnalisés pour chaque applicateur
- Modulation MLS® en CPW et FPW (émission synchronisée de Continuous Pulsed Wave et Frequenced Pulsed Wave)
- Fréquence de modulation de la pulsion MLS® de 1 à 2.000 Hz à pas de 1 Hz)
- Niveau de puissance à 25%, 50%, 75% et 100%
- Rapport cyclique fixe à 50% ou variable
- Temps de traitement de 1" à 45' à pas de 1"
- Calcul automatique de l'énergie émise en fonction des paramètres saisis

ALARMES ET SYSTEMES DE SECURITE

- Lampe d'avertissement d'émission Laser
- Verrouillage
- Signal acoustique paramétrable par l'opérateur
- Prédiposition au branchement de répéteur de signal émission Laser
- Date et heure
- Choix de langue
- Mot de passe pour la mise en marche du dispositif

ACCESSOIRES EN DOTATION

- N° 2 Lunettes de protection laser
- Sac porte-instruments
- Sac à bandoulière
- Porte-pointeur de table

DIMENSIONS ET POIDS

- 36 x 28 x 10 cm
- 3 Kg

ALIMENTATION

- Batterie à polymères de lithium
- Alimentateur externe 18 Vdc

ACCESSOIRES EN OPTION

- Chariot-Trolley ergonomique sur roulettes pourvues de butoirs en matériel antichoc, conçu pour contenir l'appareil Mphi, avec porte-pointeur incorporé et logement porte-objets

